

LIQUIBAND® Optima

TOPICAL SKIN ADHESIVE

liquiband.com



Bezigtłowe zamykanie ran

 **LIQUIBAND®**
TOPICAL ADHESIVES

Bariera mikrobiologiczna
w 10 sekund¹

LIQUIBAND® Optima

TOPICAL SKIN ADHESIVE

Unikalny aplikator kleju chirurgicznego LiquiBand® Optima wyposażony w skrzydełka umożliwia **łatwą aktywację i kontrolowaną aplikację.** ^{3, 4}

Aplikator skrzydełkowy

- ▶ Umożliwia szybkie i łatwe nakładanie kleju⁴

Precyzyjna końcówka

- ▶ Idealna do obszarów o gęstym owłosieniu*⁵

Zbiornik Visidome

- ▶ Pozwala sprawdzić pozostałą ilość kleju.




Produkt zaprojektowany do zamykania czystych, świeżych ran z łatwo nakładającymi się na siebie, pozbawionymi naprężeń krawędziami



Zawiera sterylną mieszankę 90% butylu i 10% cyjanoakrylanu oktylu, którą można przechowywać w temperaturze otoczenia.

Podczas aplikacji LiquiBand® Optima® na obszarach o gęstym owłosieniu, włosy muszą zostać rozdzielone przed nałożeniem kleju.

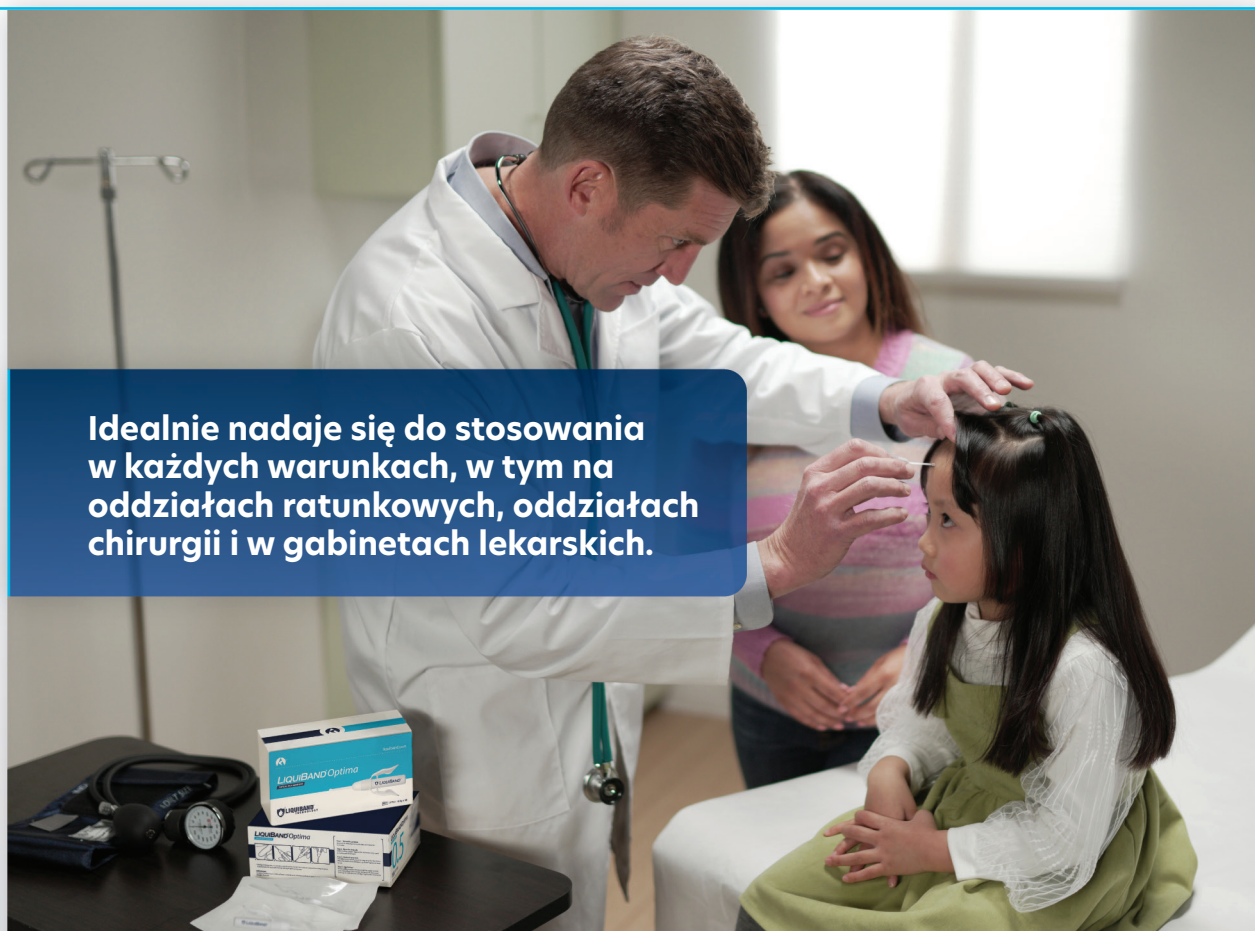

Idealnie nadaje się do stosowania w każdych warunkach, w tym na oddziałach ratunkowych, oddziałach chirurgii i w gabinetach lekarskich.

- ▶ Bezigłowa aplikacja z **10-sekundowym czasem schnięcia** ^{1, 13}
- ▶ Działa jak **odporna na wodę bariera mikrobiologiczna**, umożliwiając pacjentom wzięcie prysznica natychmiast po zabiegu za zgodą lekarza ⁶⁻⁸
- ▶ Zapewnia **doskonały efekt estetyczny** ⁹
- ▶ Nadaje się do **zamykania ostrych ran**, w tym ran skóry głowy, podbródka, twarzy i nakłuć ¹¹
- ▶ **Złuszcza się naturalnie** w ciągu 5-14 dni od aplikacji



Pojedyncza warstwa LiquiBand® Optima¹⁰ osiąga wytrzymałość na rozciąganie równą szwom 4-0

LIQUIBAND® Optima

TOPICAL SKIN ADHESIVE



Szybko, precyzyjnie, komfortowo.

Szybko: zamyka rany w zaledwie 10 sekund ¹

Precyzyjnie: idealny aplikator do ran twarzy i skóry głowy ¹¹

Komfortowo: bezigłowy aplikator minimalizujący dyskomfort pacjenta ^{12,13}



CZAS
POLIMERYZACJI
10 SEKUND



BARIERA
MIKROBIOLOGICZNA



PRECYZYJNY
APLIKATOR



BEZIGŁOWY



PRZECHOWYWANIE
W TEMPERATURZE
OTOCZENIA



WYPRODUKOWANO
W WIELKIEJ BRYTANII

Produkt	Objętość na urządzenie	Ilość w opakowaniu	Kod produktu
Optima	0,5 g	10	OPT001
Optima Mini	0,35 g	10	OPT002

Advanced Medical Solutions Limited

Langage Science Park, Western Wood Way, Plymouth PL7 5BG

www.liquiband.com | info@liquiband.com | +44 (0) 1752 209 955



Advanced Medical Solutions